

# CORIS

INMUNOCROMATOGRAFÍA  
PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE



**Rotavirus**

**Adenovirus**

**Rota/Adeno**

**Giardia**

**E. coli**


**Influenza**

**Virus Sincicial  
Respiratorio**



# CORIS

CORIS es una línea de pruebas rápidas para detección de enfermedades infecciosas como: Rotavirus, Adenovirus, Adenovirus/Rotavirus, E. coli, Giardia, Virus Sincicial Respiratorio e Influenza.

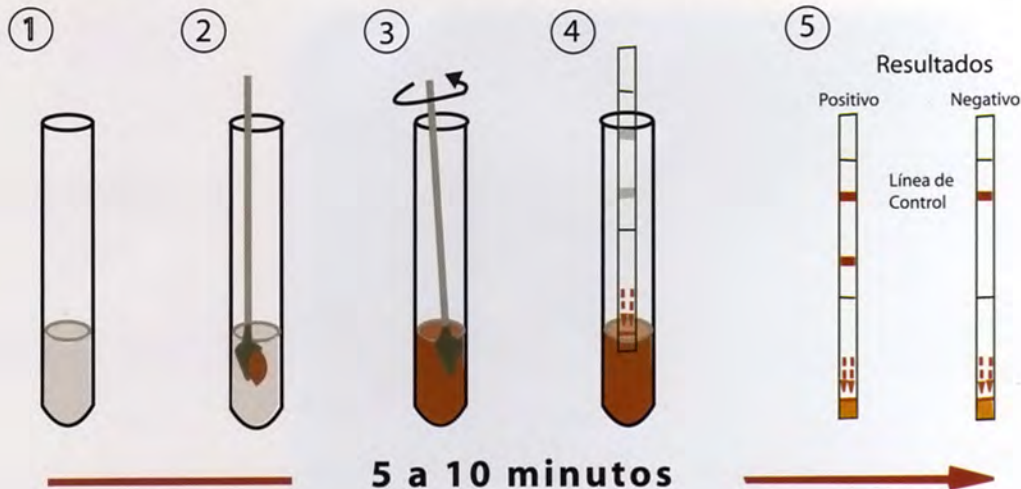

Las pruebas inmunocromatográficas son Simples, Sensibles y Económicas

- Análisis individual de muestras.
- No requiere instrumentación.
- Manipulación mínima de heces.
- No necesita filtración o centrifugación
- Precisión comparable a Elisa.

El test está listo para ser utilizado y se basa en el uso de un sistema homogéneo inmunocromatográfico a base de partículas de oro. La muestra fecal o de secreción nasofaríngea debe diluirse en el tampón de dilución previsto. Una membrana de nitrocelulosa ha sido sensibilizada con anticuerpos dirigidos contra el respectivo virus.

Cuando se introduce la tira reactiva en la fase líquida de la suspensión de secreciones nasofaríngeas o extractos de cultivo, el conjugado solubilizado migra por capilaridad con la muestra y el conjunto encuentra el polisúero anti- virus absorbido en la nitrocelulosa.

El resultado puede verse al cabo de 5 a 10 minutos dependiendo de la prueba cuando aparece una raya rojiza en la tira reactiva.

Distribuido por:  
Sofilab S.A. de C.V.  
Lisboa 14- A Col. Juárez  
Tel: 55 66 54 72  
[www.sofilab.com](http://www.sofilab.com)

